


FitoroiD^{neo}

Çrregullime të hemorroideve

Lehtëson dhimbjen, djegien dhe kruajtjen duke mbrojtur mukozën

Me Helydol dhe vaj esencial nga Pema e Çajit

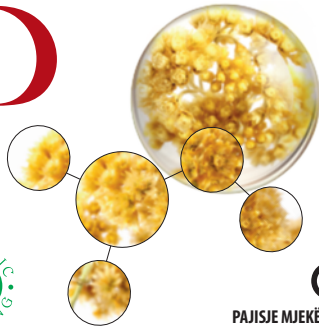

CE 0373
PAJISJE MJEKËSORE Klasa IIb

BIOPOMADË ENDOREKTALE

AL SI VEPRON: NeoFitoroid qetëson iritimin, mbron mukozën dhe favorizon normalizimin me anën e 3 mekanizmave të veprimit:

- Mukoadeziv:** ngjitet në mukozë duke formuar një film me efekt barrierë që e mbron atë nga kontakti me agjentët irritues;
 - Lubrifikues:** zvogëlon fërkimet me feçet, në mënyrë që të mbrojnë nga iritimi dhe nga bllokimi perianal;
 - Antioksidues:** mbron mukozën nga radikalet e lira duke lehtësuar indirekt inflamacionin.
- Për më tepër, NeoFitoroid krijon një ambient të pafavorshëm për rritjen e mikroorganizmave, duke kryer një veprim shtesë mbrojtës dhe duke zvogëluar kruajtjen. Vetitë e tij freskuese japin një lehtësim të shpejtë nga shqetësimet.

NeoFitoroid nuk përmban kortizone as anestetikë dhe, në sajë të mekanizmit të tij të veprimit, nuk irriton dhe nuk e than mukozën.

UDHËZIME: trajtim i hemorroideve (të brendshme e të jashtme) dhe i simptomave shoqëruese si dhimbje, djegie dhe kruajtje anale dhe perianale. Mund të përdoret edhe në prani të plagëve anale.

Mund të jetë i dobishëm edhe në parandalim e në të gjitha situatat që mund të shkaktojnë iritrim dhe/ose kongjestion të zonës anale dhe perianale (kapsllëk, diarre, ushqyerje dhe stile jetese të pashtëndetshme). Është i përshtatshëm edhe në shtatzëni dhe gjatë gjidhënies.

MËNYRA E PËRDORIMIT: për një aplikim të jashtëm, përhapeni dhe masazhoheni me delikatesë mbi zonën anale dhe perianale.

Për një aplikim të brendshëm, përdorni kanulën përkatëse endorektale që duhet të vidhohet në tub.

Aplikoni një sasi pomade të mjaftueshme për të mbuluar zonën e prekur. Përdorni produktin pas evakuimit dhe pas larjes së plotë e të kujdeshme të zonës anale dhe perianale. Për një efekt parandalues nga iritimi për shkak të fërkimit, bëjeni trajtimin përpara evakuimit, duke e aplikuar përsëri produktin edhe më pas. Pas përdorimit, zhvendoseni kanulën, pastrojini me kujdes me ujë të nxehtë dhe sapun dhe mbyllni tubin e pomadës. Është e mundur ta përsërisni aplikimin disa herë në ditë, madje edhe brenda një intervali të shkurtër, si dhe për periudha të zgjatura.

PËRBËRJA - Substancat funksionale: ekstrakte të thata të bimës së makthit (Helichrysum) maja të lulëzuara fraksion lipofilik (Helydol)* e rrenjë Rrushkulli*; Xhel fletë i dehidratuar nga Aloe vera*; Tretësirë ujore e majave të lulëzuara të bimës së makthit*; Ekstrakt vajor i majave të lulëzuara të lules së basanit*; Vaj Jojoba*; Gjalpë Karitë*; Vajra esenciale nga: Pema e Çajit, Qiparisi dhe nenexhiku.

Gjithashtu përmban: glicerilstearat, trigliceride kapriik/kaprik, distearat sakaroze, stearat sakaroze, alkoool cetilsteartilik, glicerinë vejetale, trihidrosistearinë, vajra vejetal, vajra vejetal të hidrogjenuar, dyll kandelilla, gomë ksantan, acid citrik, tokoferole, silikat natriumi, alkoool benzilik, sorbat kaliumi, dehidroacetat natriumi, vaj Luledielli.

**Përbërës nga Bujqësia Biologjike*

PARALAJMËRIME: nuk duhet përdorur nëse kemi mbindjeshmëri ose alergji individuale ndaj një ose më shumë përbërësve.

Në rast se simptomat nuk përmirësohen, rekomandohet të konsultoheni me mjekun tuaj.

Të ruhet në temperaturë ambiente, larg burimeve të nxehtësisë dhe të mbrohet nga drita. Të mbahet larg fëmijëve. Data e skadimit i referohet produktit të papërkur dhe të ruajtur në mënyrë korrekte.

SKADIMI: Shihni datën e shtypur mbi ambalazh. Mos e përdorni pas datës së skadimit të paraqitur.

Pas hapjes këshillohet që produkti të përdoret brenda 4 muajve.

KONFEKSION SHITJE

Tub me 40 ml e Përmban aplikator endorektal.

Data e revizionimit të fundit: 05/2015



PËR SHËNDETIN SOT DHE NESËR

Aboca është një Shoqëri Benefit dhe është e certifikuar B Corp. Ne jemi të përkushtuar të veprojimë në një mënyrë të përgjegjshme, të qëndrueshme dhe transparente ndaj komunitetit dhe ambientit. Relacioni i ndikimit është i disponueshëm në faqen e internetit www.aboca.com

Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Ndërmarrje me sistem të administrimit të cilësisë ISO 9001 e ISO 13485

dhe sistem të administrimit ambiental ISO 14001 të certifikuar.

Certified



Corporation


MATERIALE AMBALAZHIMI	
Paketim	PAP 21 > Letër
Fletëpalosje	PAP 22 > Letër
Tub	ALU 41 > Alumini
Tapë	PP 5 > Plastikë
Bustinë kanule	PP 4 > Plastikë
Mbulesë kanule	LDPE 4 > Plastikë
Kanula	PP 5 > Plastikë

Për eliminimin, verifikoni dispozitat në zonën tuaj të banimit.

FitoroiD^{neo}

Haemorrhoidal discomfort
Soothes pain, burning and itching
while protecting the mucosa

With Helydol and Tea tree oil

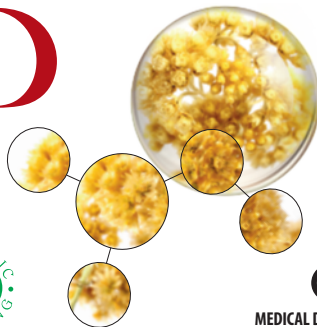

CE 0373
MEDICAL DEVICE Class IIb

ENDORECTAL BIOOINTMENT

HOW IT WORKS: NeoFitoroid calms irritation, protects the mucosa and supports its normalisation through **3 mechanisms of action:**

- Mucoadhesive:** adheres to the mucosa, forming a barrier-like film that protects it from contact with irritants;
- Lubricant:** reduces the friction caused by stool passage to protect against irritation and perianal congestion;
- Antioxidant:** protects the mucosa against free radicals, thereby indirectly alleviating inflammation.

In addition, NeoFitoroid creates an environment that is **not conducive to the growth of microorganisms**, thus providing an additional action that protects and reduces itching. Its **refreshing properties** offer rapid relief to discomfort.

NeoFitoroid does not contain corticosteroids or anaesthetics, and its mechanism of action ensures that it does not irritate or dry out the mucosa.

INDICATIONS: indicated for the treatment of **haemorrhoids** (both internal and external) **and their symptoms**, such as **pain, burning and anal and perianal itching**. It can be used **even in the case of anal fissures**.

It can also be used **in prevention and in all situations** that can cause **irritation and/or congestion** of the anal and perianal region (constipation, diarrhoea, unhealthy eating or lifestyle).

Also suitable during pregnancy and breastfeeding.

INSTRUCTIONS FOR USE: for external application, gently apply and massage onto the anal and perianal area.

For internal application, use the endorectal cannula provided, which can be screwed onto the tube. Apply enough ointment to cover the affected area.

Use the product after bowel movements, following careful and gentle washing of the anal and perianal area. As a preventive measure against irritation caused by friction, the treatment can be carried out before bowel movements, remembering to reapply the product afterwards. After use, unscrew the cannula, clean it thoroughly with soap and warm water, and dose the ointment tube. It is possible to repeat the application several times a day, even at close intervals and for prolonged periods.

COMPOSITION - Functional substances: dried extracts of the lipophilic fractions of Helichrysum flowering tops (Helydol)* and Butcher's Broom root*; Gel of dehydrated Aloe Vera leaf*; Aqueous solution of Helichrysum flowering tops*; Oily extract of Hypericum flowering tops*; Jojoba oil*; Shea butter*; Tea tree, Cypress and Peppermint essential oils. *Also contains: glyceryl stearate, caprylic/capric triglyceride, sucrose distearate, sucrose stearate, cetylstearyl alcohol, vegetable glycerine, trihydroxystearin, vegetable oil, hydrogenated vegetable oils, candelilla wax, xanthan gum, citric acid, tocopherols, sodium silicate, benzyl alcohol, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, sunflower oil.*

*Organically Farmed Ingredient

WARNINGS: do not use in case of individual hypersensitivity or allergy to one or more components. If symptoms do not improve, seek medical advice. Store at room temperature, away from heat sources and light. Keep out of reach of children. The expiry date refers to the intact product, stored correctly.

EXPIRY DATE: see the expiry date stated on the package. Do not use after the expiry date indicated.

Upon opening, it is recommended to use the product within 4 months.

PACK FOR SALE

40 ml tube Contains endorectal applicator.

Last revision date: 05/2015



FOR TODAY AND TOMORROW'S HEALTH

Aboca is a Benefit Corporation and certified B Corp. We are committed to operating responsibly, sustainably and transparently towards the community and the environment. Impact report available at www.aboca.com

Aboca S.p.A. Società Agricola
Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com
Company operating under certifications ISO 9001 and ISO 13485 for quality management system and ISO 14001 for environmental management system.

Certified
 Corporation

PACKAGING MATERIALS		
Carton	PAP 21	> Paperboard
Leaflet	PAP 22	> Paper
Tube	ALU 41	> Aluminium
Cap	PP 5	> Plastic
Cannula sachet	PP 4	> Plastic
Cannula cover	LDPE 4	> Plastic
Cannula	PP 5	> Plastic

For disposal, please check the regulations in your local area.

ALLEAR01Z-B